



**AQUOLAB<sup>®</sup>**  
the new  
H<sub>2</sub>OZONE therapy



**MULTISALES**  
OZONE SOLUTIONS



L'ozonoterapia rientra nella categoria dei nuovi protocolli in odontoiatria sebbene gli effetti benefici dell'ozono non siano affatto sconosciuti.

L'ozono medicale ha proprietà antibatteriche, antivirali, antifungine.

# Ozonoterapia e odontoiatria

**L'ossigeno-ozono terapia è una tecnica dolce che sfrutta le potenzialità dell'ozono, combinato con l'ossigeno, svolgendo diverse azioni:**


- analgesica
- antinfiammatoria
- antibatterica
- antimicotica
- immunomodulante

Tutte queste caratteristiche lo rendono indicato all'applicazione in ambito odontoiatrico.

**Aquolab è un innovativo dispositivo medico** che basa la sua efficacia non sulla potenza del getto d'acqua ma **sulle benefiche proprietà dell'ozono miscelato con l'acqua.**

Aquolab, nella **versione Professional**, è un valido alleato dell'odontoiatra e dell'igienista in molte attività quotidiane dello studio.

Nella **versione Basic** può essere consigliato ai vostri pazienti come efficace terapia domiciliare per una corretta igiene orale e per il mantenimento, nel tempo, della qualità dei trattamenti effettuati in studio.

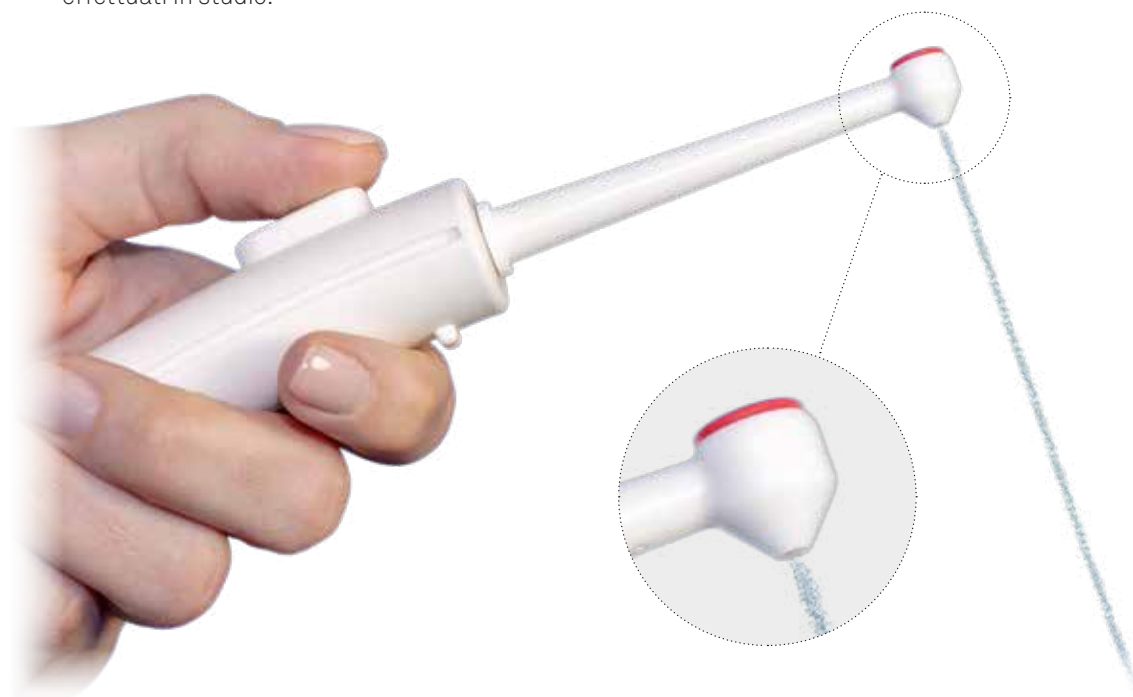

## **Perché utilizzare l'ozono in un irrigatore orale**

- Ha un altissimo potere disinfettante
- Inibisce la formazione di batteri causa di infezioni e alitosi
- Ha proprietà antibatteriche e antivirali
- L'ozono miscelato in acqua esprime al massimo la sua efficacia anche a basse concentrazioni
- Non è invasivo, non lascia residui ed è assolutamente ecologico: proprio perché è miscelato in acqua non esiste alcun rischio di inalazione né per il paziente né per l'operatore.

**Sperimentazioni scientifiche dimostrano l'efficacia di Aquolab anche in soggetti diabetici affetti da parodontite**

Il trattamento con l'ozono, in giuste quantità come quelle previste da Aquolab, è completamente innocuo e privo di controindicazioni. L'ozono è prodotto autonomamente dall'apparecchio, senza necessità di alcuna ricarica esterna.

# AQUOLAB Basic

AQUOLAB BASIC è studiato specificatamente per uso domiciliare, per il mantenimento di una corretta igiene orale.

## Aquolab è utile a:

- Prevenire e curare parodontiti e disturbi gengivali come infiammazioni e sanguinamento
- Aiuta a gestire la carica batterica del cavo orale
- Prevenire la formazione della carie
- Prevenire insorgenza di afte e herpes
- Combattere efficacemente l'alitosi senza l'uso di colluttori aggressivi e potenzialmente dannosi



## Particolarmente indicato per:

- Pazienti con impianti
- Pazienti con protesi fisse o mobili
- Pazienti con apparecchi fissi ortodontici
- Pazienti affetti da parodontite
- In tutti i casi in cui è consigliabile un idoneo mantenimento dell'igiene a seguito del trattamento con Aquolab Professional

## Aquolab è sicuro per il paziente:

- Pressione acqua leggera e non invasiva
- Inodore ed insapore
- Completamente innocuo
- Facile da usare
- 2 regolazioni di ozono e acqua
- Fornito con 4 ugelli, può essere usato da tutta la famiglia

## Confezione:

Aquolab Basic comprensivo di: unità di controllo e manipolo incorporato con cavo spiralato 1,5 mt, 4 ugelli (3 da 0,6 mm + 1 da 0,8 mm) e di 1 blister (3 fiale monouso) di soluzione decalcificante

### Tasti e led per la gestione di

pressione acqua  
concentrazione ozono

2 livelli  
Liv.1 mg/L 0,016 +/-  
0,004, Liv.2 mg/L 0,028  
+/- 0,006

quantità ozono  
capacità  
tempo erogazione  
dimensioni  
peso

2 livelli  
300 ml  
60/90 secondi  
cm 15 X 15 X 14  
0,99 kg



| codice articolo | descrizione                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AQPRO01</b>  | Aquolab Professional PRO 2.3: comprensivo di 10 ugelli sterilizzati (7 da 0,6 mm + 3 da 0,8 mm) e di 1 blister (3 fiale monouso) di soluzione decalcificante |
| <b>AQNOS06M</b> | Confezione 20 ugelli sterilizzati monouso 0,6 mm                                                                                                             |
| <b>AQNOS08M</b> | Confezione 20 ugelli sterilizzati monouso 0,8mm                                                                                                              |
| <b>AQNOS06</b>  | Confezione 80 ugelli sterilizzati monouso 0,6 mm                                                                                                             |
| <b>AQNOS08</b>  | Confezione 80 ugelli sterilizzati monouso 0,8 mm                                                                                                             |
| <b>AQBAS01</b>  | Aquolab Basic: comprensivo di 4 ugelli (3 da 0,6 mm + 1 da 0,8 mm) e di 1 blister (3 fiale monouso) di soluzione decalcificante                              |
| <b>AQNOZ06</b>  | Blister 2 pcs ugelli 0,6mm non sterilizzati , per Aquolab Basic                                                                                              |
| <b>AQNOZ08</b>  | Blister 2 pcs ugelli 0,8mm non sterilizzati, per Aquolab Basic                                                                                               |
| <b>AQDES03</b>  | Blister soluzione anticalcare (3 fiale)                                                                                                                      |

**Aquolab è un dispositivo Made in Italy**





## Bibliografia:

- Carinci F., Palmieri A., Girardi A., Cura F., Lauritano D.  
**Aquolab® ozone-therapy is an efficient adjuvant in the treatment of chronic periodontitis: a case-control study.**  
*J Orolfac Sci* 2015;7:27-32
- Marconcini S., Giammarinaro E., Giampietro O., Giampietro C., Soder B., Genovesi Rdh A., Barone A. and Covani U.,  
**Oxidative stress and periodontal disease in diabetic patients: a 3-month pilot study,**  
*Dent Oral Craniofac Res*, 2017, Vol. 3, 1-5
- DDS Casu C., President of AIRO  
**A gingival persistent white lesion treated with Aquolab (case report),**  
*January 2018*
- Marconcini S.,  
**Ozono tra mito e realtà,**  
*Perio Tribune Italian Edition - Ottobre 2017; 9*
- Casu G.,  
**Lingua Nigra: trattamento tramite Aquolab, (Case report),**  
*Settembre 2017*
- Genovesi A.M., Giammarinaro E.  
**La bocca dolce: nota tecnica sul mantenimento della riabilitazione implanto-protetica complessa nel paziente diabetico**  
*Hygiene Tribune Italian Edition – Speciale, Dicembre 2017; 20*
- Cosola S., YM Park  
**Acqua ozonizzata come metodo aggiuntivo di igiene orale per il mantenimento della salute parodontale in giovani pazienti in trattamento ortodontico fisso**  
*Poster SIOI*
- Strammiello S., Di Venere D., Abbinante A., De Vito, D.  
**Ozonoterapia della gengivite marginale in pazienti con trattamento ortodontico fisso multibrackets,**  
*Poster XVI Congresso Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale, Giugno 2017*



## SCIENTIFIC PARTNERS



Istituto Stomatologico Toscano  
Centro di Odontoiatria



Università di Pisa

# AIRO

Accademia Italiana Ricerca Orale



rev. 04-18



**MULTISALES S.R.L.**

Via Broseta 101/I - 24128 Bergamo

+039 35 222 651

info@multisales.it

www.multisales.it

Aquolab è un dispositivo medico di classe I fabbricato da EB2C Srl, Milano, e marcato CE.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

Tutti i marchi presenti nella pubblicazione sono proprietà di Multisales srl, con eccezione dei prodotti per i quali è diversamente indicato. Questi prodotti sono destinati agli studi medici e ai laboratori, la loro vendita non è rivolta al paziente.

È vietato rivendere, duplicare o divulgare i prodotti contenuti nella presente pubblicazione senza il consenso scritto di Multisales srl.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti collaterali, si faccia riferimento al sito web di Multisales srl. contenuti sono aggiornati al momento della pubblicazione.

Contattare l'azienda Multisales srl per gli aggiornamenti successivi.