

Il generatore di ozono per l'odontoiatria.

La terza generazione di OZONOSAN cytozon, produce principalmente acqua ozonizzata per la disinfezione e la guarigione delle ferite in implantologia, per il trattamento della parodontite, per il trattamento del canale radicolare e per la pulizia professionale dei denti.

## Caratteristiche principali del prodotto

Ozonizzazione dell'acqua completamente automatica con dose di ozono ottimizzata.

L'acqua addizionata di ozono o lo spray d'acqua ossigeno-ozono possono essere prelevati con il manipolo multifunzione.

La connessione a baionetta aggiuntiva consente il collegamento multiplo di dispositivi come ultrasuoni o piezo chirurgico.

Potente catalizzatore per la distruzione sicura dell'ozono.

Manutenzione ridotta con durata del prodotto superiore alla media.

Sviluppato e prodotto in Germania.



Specifiche tecniche	OZONOSAN cytozon
Configurazione dispositivo	Unità da tavolo
Modalità di funzionamento	Trattamento acqua con ozono
Concentrazione di ozono	ca. 80 µg/ml di miscela di ossigeno-ozono ca.15 µg/ml acqua
Trattamento acqua con ozono	preparato 1l serbatoio 3l
Prelievo dell'acqua	Prelievo acqua ozonizzata tramite manipolo o rubinetto
Dimensioni [L x A x P]	20 x 55 x 45 cm
Peso	20 kg
Dati elettrici	230 V CA; 50Hz; 1,2A; Classe di protezione I
Classificazione	Ila dispositivo medico secondo la Direttiva UE 93/42/CEE
Garanzia	2 anni; 5 anni per tubo ozono e catalizzatore



Grande autoemoterapia

Piccola autoemoterapia

Insufflazione rettale

Trattamento locale con sacchetto

Applicazione ozono a bassa pressione

Iniezioni di ossigeno ozono


Acqua ozonizzata



## Concentrazione di ozono in mg/l acqua<sup>1</sup>

La figura mostra la concentrazione di ozono in tre acque diverse.

Per l'acqua deionizzata l'emivita è di 9,5 minuti, per l'acqua bidistillata di 24 minuti e per di acqua pro sterilizzata da iniezione l'emivita è di 20 minuti.

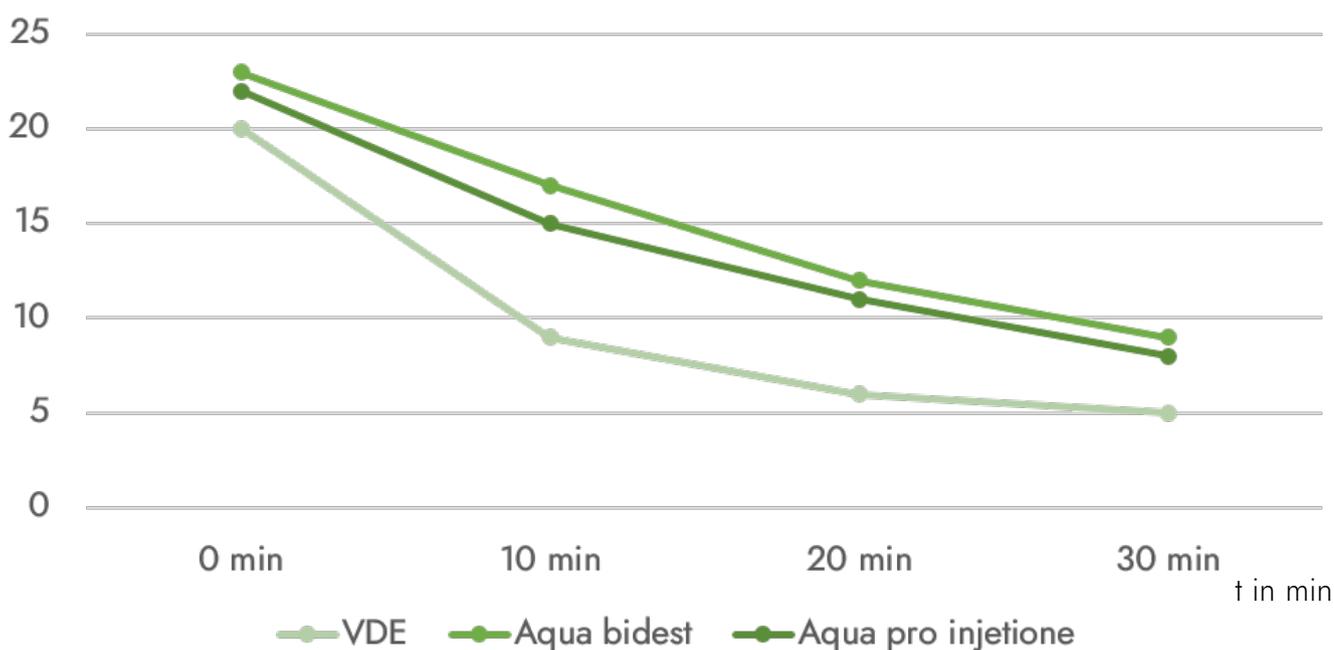

<sup>1</sup> Viebahn-Hänsler, León Fernández, Ozone in Medicine - From Science to Guidelines and Treatment Concepts, Edition 2020, page 113

**Multisales srl**

Via Broseta 101 i, 24128 Bergamo (BG), Italy

+39 035 222 651

@ info@multisales.it

www.multisales.it



Produttore:

Hänsler Medical GmbH

Nordring 8, 76473 Iffezheim, Germany

www.haensler-medical.com

